


Guide utilisateur pour chaise de WC/douche INOXLINE A INCLINAISON ELECTRIQUE

Référence CREE 20118



IMPORTANT !

- LORSQUE VOUS CHARGEZ L'APPAREIL, N'ALLUMEZ PAS L'INTERRUPTEUR AVANT QUE LE CHARGEUR NE SOIT BRANCHÉ SUR LA CHAISE.
- LA BATTERIE DOIT ÊTRE CHARGÉE 24 HEURES LA PREMIÈRE FOIS.
- LORSQUE LA BATTERIE EST EN PANNE, IL Y A UN BIP SONORE DU BOÎTIER DE COMMANDE LORSQUE LES PIÈCES ÉLECTRIQUES SONT EN COURS D'UTILISATION.
- LORSQUE LE BIP SONORE VIENT, VOUS DEVEZ RECHARGER LA BATTERIE CAR ELLE PEUT ÊTRE ENDOMMAGÉE SI VOUS LA LAISSEZ FONCTIONNER 100% HORS DE LA PUISSANCE.
- SI LA BATTERIE EST À COURT D'ÉNERGIE, VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER LE MOTEUR EN PLAÇANT LE CHARGEUR DANS LA PRISE MURALE ET LA CHAISE. UNE RECHARGE COMPLÈTE PREND TYPIQUEMENT 8 HEURES.
- SI LE BOUTON DE LUMIÈRE SUR LE CHARGEUR S'ALLUME EN VERT LORSQU'IL EST BRANCHÉ, CELA EST DUE À UN DYSFONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE, ET IL DOIT DONC ÊTRE CHANGÉ.
- NE CHARGEZ PAS LA CHAISE PENDANT QU'ELLE EST UTILISÉE DANS DES ZONES EN CONTACT AVEC DE L'EAU.
- NE PAS UTILISER LES FONCTIONS ÉLECTRIQUE DE LA CHAISE PENDANT LA PULVÉRISATION AVEC DE L'EAU.

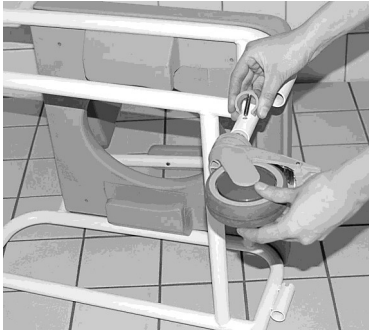


Lors du montage des roues, les pieds télescopiques sont placés dans les tubes et les clips sont montés en hauteur appropriée et uniforme.




Les vis sont serrées à l'aide de la clé Allen lors du montage de l'arrière. Assurez-vous que les vis soient serrées pour assurer la stabilité.



Lors du montage de l'accoudoir, soulever le verrou à enclenchement, puis l'accoudoir est tiré vers le haut et poussé sur le côté.

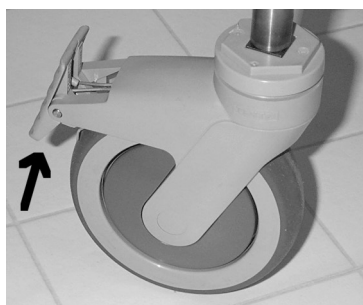


Verrouillez les quatre roues lors de la baignade/douche. La roue avant droite (gris foncé) peut être directionnellement verrouillée pour faciliter la conduite de la chaise.

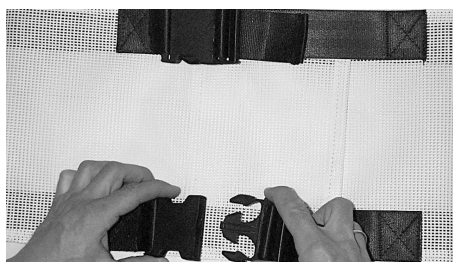

Réglage du dos (Voir photos).

Important ! Lavage arrière max. à 80 degrés.

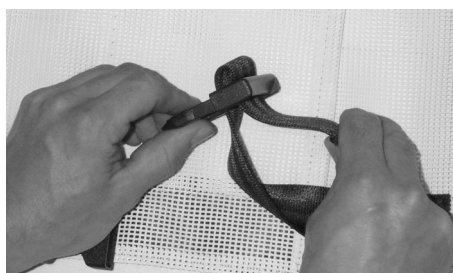




La hauteur du repose-pied est ajustée au moyen de clips. Pour plus d'espace, les repose-pieds peuvent être poussés de côté en soulevant et en tournant, tandis que les repose-pieds peuvent être inclinées.




Le support de mollet est fixé et ajusté par la bande Velcro à l'arrière.


Important ! Support de mollet lavé à max. 80 degrés.

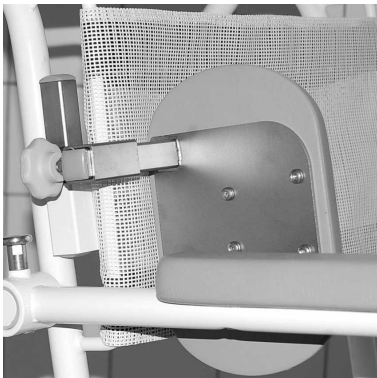

Les appuis latéraux sont cliqués vers le bas dans les tuyaux carrés du cadre. En ajustant la profondeur desserrer la vis de serrage manuel et serrer à nouveau à la bonne position.

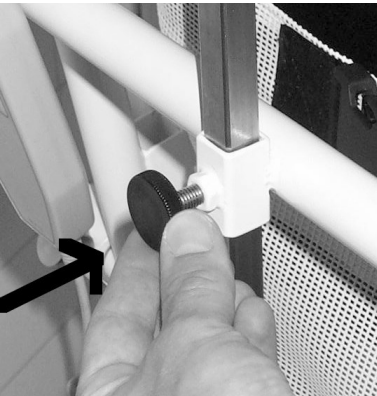


Le repose-tête est réglable en hauteur en desserrant et en serrant la vis à la bonne position.

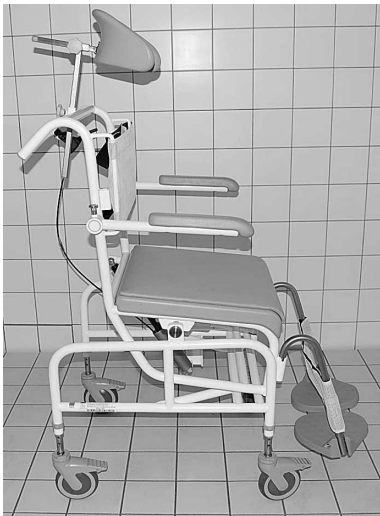


Soyez conscient que l'utilisateur peut tomber en avant en position inclinée vers l'avant !




Le fauteuil est incliné en appuyant sur le bouton de la commande manuelle vers le haut ou vers le bas. Si l'utilisateur est en mesure de tenir sur les accoudoirs, l'aide doit mettre les mains de l'utilisateur sur ses genoux avant que le fauteuil se lève en position de pointe.

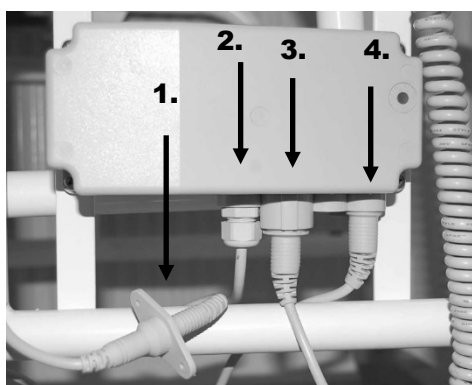

1. Cable pour la boîte de batterie
2. Boîte de verrouillage du câble
3. Cable pour l'actionneur du dossier
4. Cable pour l'actionneur de siège

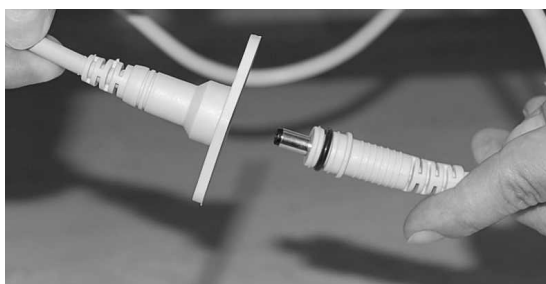

Lorsque vous chargez la batterie, retirez la prise d'alimentation du boîtier de la batterie et insérez la prise du chargeur.

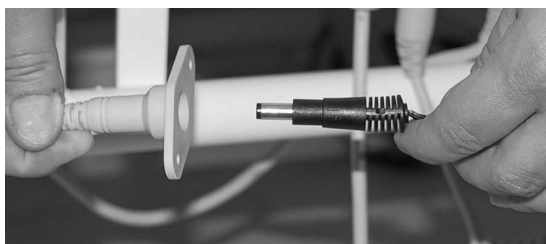

La chaise est reçue entièrement chargée. Une charge complète dure environ 8 heures. Lorsque la batterie est en train de devenir faible, le chargeur bipera. Lorsque la batterie charge la LED sur le chargeur est orange. Lorsque la batterie est chargée, la LED du chargeur est verte. Remarque : si la lumière sur le chargeur s'allume en vert lorsqu'elle est connectée, il y a un défaut dans la batterie et elle doit être changée.



Seau tiré à l'arrière du siège dans un mouvement régulier.



Évitez de vous asseoir sur les 10 derniers centimètres du siège, car le fauteuil peut basculer vers l'avant.



Ne pas se tenir sur les repose-pieds.

| Numéro Article | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Charge max. 150 kg</p> <p>Attention ! Poussez les clips vers le bas lors du réglage des hauteurs.</p> <p>Attention ! Ne pas utiliser dans les environnements contenant du chlore comme piscines, etc.</p> <p>2 ans droits de réclamation contre les erreurs de fabrication. 6 mois sur les batteries.</p> <p>Conditions de réclamation pour le cadre :</p> <p>HMN octroie 5 ans de droits à plainte contre la rupture de cadre pour toutes les chaises de douche/toilette M2 et les tabourets de douche en acier inoxydable. La garantie s'applique pour les pannes de production et de matériaux, et ne peut être utilisée que si les produits ont été utilisés en usage normal. Veuillez noter que l'usure normale n'est pas couverte par la garantie.</p> | <p>Nettoyage :</p> <p>Le produit peut être nettoyé avec un nettoyage régulier sans détergent non abrasif.</p> <p>Lavez et séchez le produit après le nettoyage. Le produit peut être lavé jusqu'à 85 °C en 3 minutes.</p> |



DISTRIBUTEUR
 ZI du RECOU
 F 69520 GRIGNY
 Tel. : 04 72 24 08 99 Fax : 04 72 24 25 36
 E-Mail : cree@cree.fr
www.cree.fr

