


## **Guide utilisateur pour siège de douche/WC INOXLINE Standard.**

Références 20116 (dossier PU) et 20117 (dossier filet)


Prévus pour être utilisés lors de la douche et du passage aux toilettes.





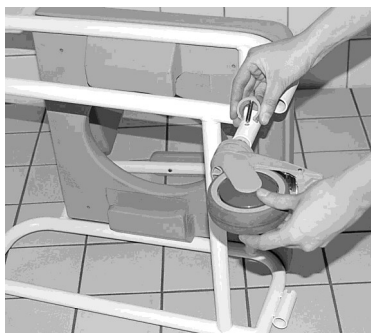

Lors du montage des roues, les pieds télescopiques sont placées dans les tuyaux et les clips sont montés en hauteur appropriée et uniforme.

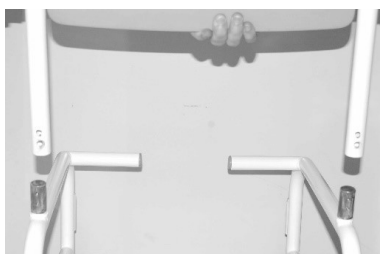


Les vis sont serrées à l'aide de la clé Allen lors du montage du dossier. Assurez-vous que les vis sont serrées pour assurer la stabilité.






Les vis sont serrées à l'aide d'une clé Allen. Assurez-vous que les vis sont solidement serrées pour assurer la stabilité de la colonne vertébrale. Rappelez-vous de serrer le dossier après environ 1 mois. Les vis doivent être jetées lors du démontage, utilisez de nouvelles vis lors du prochain montage.

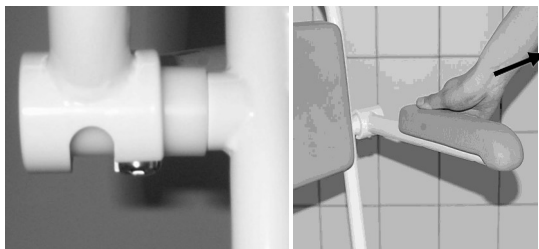


Pour installer / retirer les accoudoirs ; placez l'étiquette des accoudoirs vers le haut et sur le côté.

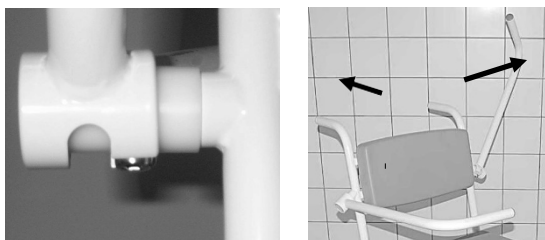


Pour installer/retirer les accoudoirs ; place l'accoudoir vers le haut et inclinez le sur le côté

Peut également être retiré sur le côté.

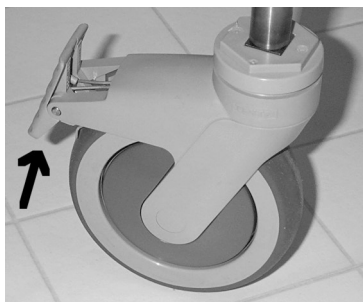



Verrouillez les quatre roues lors de la douche. La roue avant droite (gris foncé) peut être directionnellement verrouillée pour faciliter la conduite de la chaise.

Réglage du dos (Voir photos). Important ! Lavage arrière max. à 80 degrés.

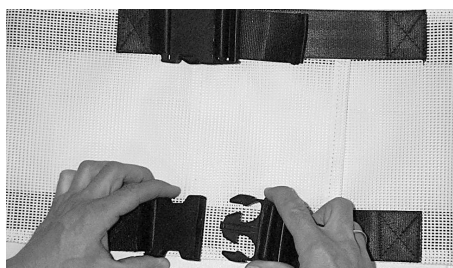


Réglage du dossier (Voir photos). Important ! Lavage arrière max. à 80 degrés.

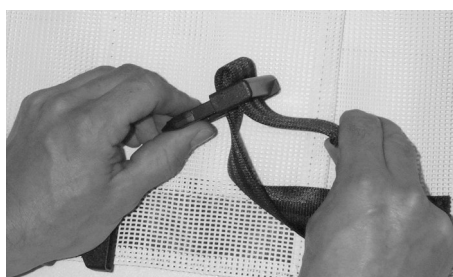

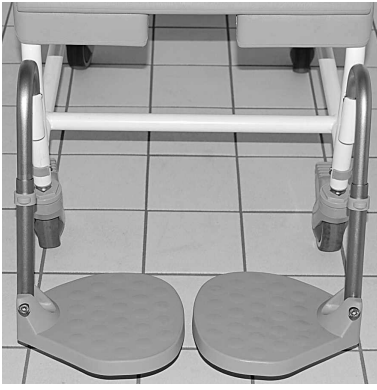

La hauteur des repose-pieds est ajustée au moyen de clips. Pour plus d'espace, les repose-pieds peuvent être poussés de côté en soulevant et en tournant, tandis que les repose-pieds peuvent être inclinés.

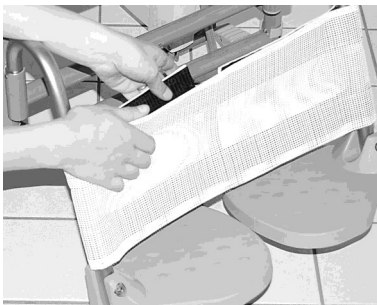

Le support de mollet est fixé et ajusté par la bande Velcro à l'arrière.  
Important ! Support de veau lavé à max. 80 degrés.




Seau tiré à l'arrière du siège dans un mouvement régulier.



Évitez de vous asseoir sur les 10 derniers centimètres du siège, car le fauteuil peut basculer vers l'avant.



Ne pas se tenir sur les repose-pieds.

Art. nr.	
<p><b>Siege de toilette :</b> Charge Max. 150 kg</p> <p>20116 (dossier Polyuréthane)</p>	<p><b>Siege de toilette :</b> Charge Max. 150 kg</p> <p>20117 (dossier filet)</p>
<p><b>Attention !</b> Poussez les clips vers le bas lors du réglage des hauteurs.</p> <p>2 ans de droits de réclamation contre les erreurs de fabrication.</p> <p><b>Conditions de la demande de cadre.</b></p> <p>CREE octroie 5 ans de droits de revendication contre la rupture de châssis pour toutes les chaises de douche INOXLINE en acier inoxydable. La garantie s'applique pour les pannes de produits et de matériaux, et ne peut être utilisée que si les produits ont été utilisés en usage normal. Veuillez noter que l'usure normale n'est pas couverte par la garantie.</p>	<p><b>Nettoyage :</b></p> <p>Le produit peut être nettoyé avec un nettoyant régulier sans détergent non abrasif. Lavez et séchez le produit après le nettoyage. Le produit peut être lavé jusqu'à 85 ° c en 3 minutes.</p> 



**DISTRIBUTEUR**  
 ZI du RECOU  
 F 69520 GRIGNY  
 Tel. : 04 72 24 08 99 Fax : 04 72 24 25 36  
 E-Mail : cree@cree.fr  
 www.cree.fr