

**Guide d'utilisation du fauteuil de douche / toilettes INOXLINÉ
Modèle inclinaison et déplacement électriques
Référence 20180**


Destiné à être utilisé lors des bains / douches et des toilettes






IMPORTANT!

- LORS DU RECHARGEMENT, N'ALLUMEZ PAS L'INTERRUPTEUR AVANT QUE LE CHARGEUR SOIT CONNECTÉ À LA CHAISE.
- LA BATTERIE DOIT ÊTRE CHARGÉE 24 HEURES LA PREMIÈRE FOIS.
- LORSQUE LA BATTERIE EST PROCHE D'ÊTRE DÉCHARGÉE, UN BIP SONORE SORT DE LA BOÎTE DE CONTRÔLE LORS DE L'UTILISATION DES ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES.
- LORSQUE LE BIP SONORE VIENT, VOUS DEVEZ RECHARGER LA BATTERIE CAR ELLE PEUT ÊTRE ENDOMMAGÉE SI VOUS LA LAISSEZ FONCTIONNER À 100%.
- SI LA BATTERIE EST ALIMENTÉE, VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER LE MOTEUR EN PLAQUANT LE CHARGEUR DANS LA PRISE MURALE ET LA CHAISE. UNE RECHARGE COMPLETE PREND TYPIQUEMENT 8 HEURES.
- SI LE BOUTON LUMINEUX DU CHARGEUR S'ALLUME VERT AU MOMENT DU CHARGEMENT, IL RESULTE D'UN DYSFONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE ET, PAR CONSÉQUENT, IL FAUT LE CHANGER.
- NE PAS CHARGER LA CHAISE LORS DE L'UTILISATION DANS DES ZONES D'EAU.
- N'UTILISEZ PAS LES FONCTIONS ELECTRIQUES SUR LA CHAISE LORS DE PULVÉRISATIONS AVEC DE L'EAU.

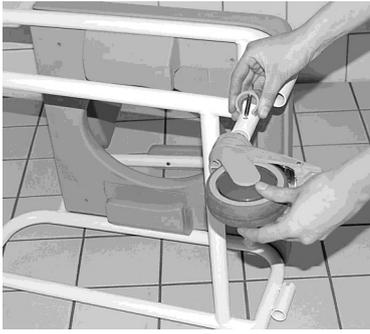


Lors du montage des roues, les pieds télescopiques sont placés dans les tuyaux et les clips sont montés à une hauteur appropriée et uniforme.

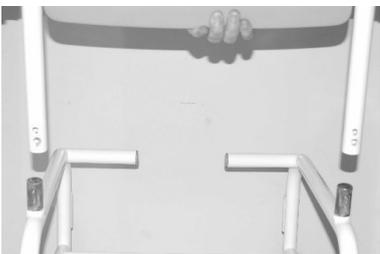


Les vis sont serrées à l'aide de la clé Allen lors du montage du dossier. Assurez-vous que les vis sont bien serrées pour assurer la stabilité.



Lors du montage de l'accoudoir, le verrou à pression est levé, puis l'appui-bras est relevé et poussé sur le côté.

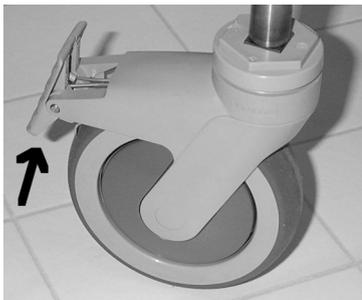


Verrouillez les quatre roues lorsque vous prenez un bain ou une douche. La roue avant droite (gris foncé) peut être verrouillée directionnellement pour faciliter la conduite.

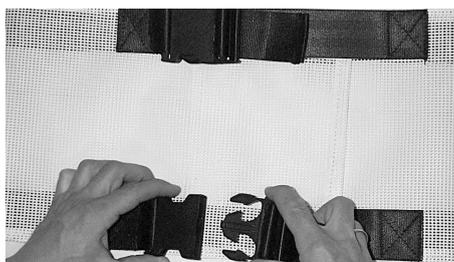

Réglage du dossier (voir photos).


Important! Lavage du dos max. à 80 degrés.

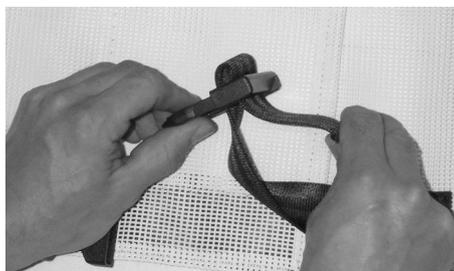


La hauteur des repose-pieds est ajustée à l'aide de clips. Pour plus d'espace, les repose-pieds peuvent être écartés en levant et en tournant, tandis que les repose-pieds peuvent être inclinés.



Le support de mollet est sécurisé et ajusté par la bande velcro à l'arrière. Important! Support mollet lavé à max. 80 degrés.

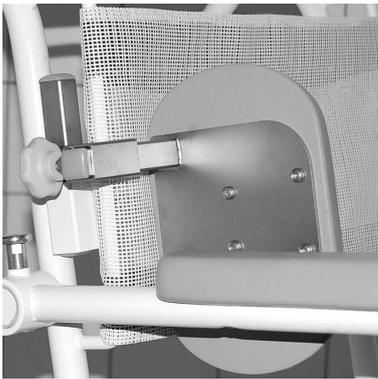

Les supports latéraux sont encliquetés dans les tubes carrés du cadre. En ajustant la profondeur, desserrez la vis réglable manuellement et resserrez à la bonne position.

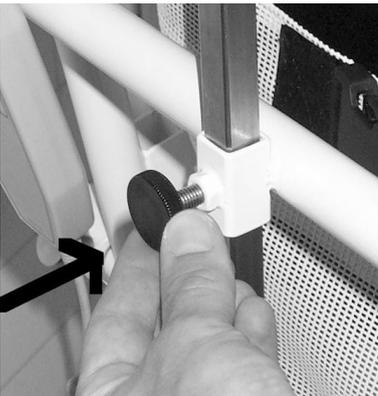

L'appuie-tête est réglable en hauteur en desserrant et en resserrant la vis dans la bonne position.




Sachez que l'utilisateur peut tomber en avant en position de pointe négative!




Le fauteuil est basculé en appuyant sur le bouton de la commande manuelle vers le haut ou le bas. Si l'utilisateur parvient à se tenir aux accoudoirs, l'assistant doit mettre ses mains sur ses genoux avant que le fauteuil ne bascule.



Le seau est tiré par l'arrière du siège dans un mouvement régulier.

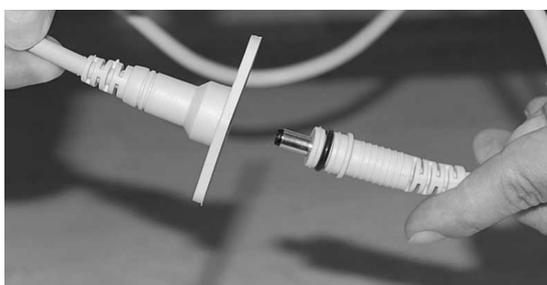


Lors du chargement de la batterie, débranchez le câble d'alimentation du chargeur et insérez la fiche du chargeur.

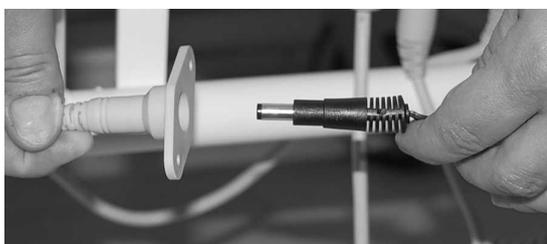



La chaise est reçue complètement chargée. Une charge complète prend environ 8 heures. Lorsque la batterie est faible, le bip retentit. Lorsque la batterie est en cours de chargement, le voyant du chargeur est orange. Lorsque la batterie est chargée, le voyant du chargeur est vert. Remarque: Si le voyant du chargeur s'allume en vert lors de la connexion, la batterie est défectueuse et doit être changée.

www.HMN.dk

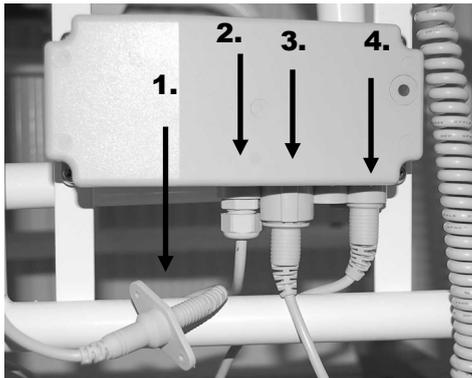

1. Insérer dans le boîtier de batterie
2. Boîte de verrouillage de câble
3. Actionneur de câble vers l'arrière
4. Câble pour actionneur de siège



En utilisant le joystick. Le fauteuil est facilement contrôlé par l'influence du joystick dans la direction souhaitée.



Emplacement du joystick. Le joystick peut être placé à l'avant pour le besoin de l'utilisateur ou derrière pour l'utilisation via l'aidant. Utilisez la vis à molette fixée au joystick, là où vous le souhaitez.



Le fauteuil est équipé d'un klaxon qui s'active en appuyant sur le bouton central.



Une lumière sur la console du joystick indique la charge de la batterie. Lorsque les voyants verts ne s'allument plus, le fauteuil doit être mis en charge. NB! Si les batteries sont faibles, elles seront endommagées et ne pourront pas être rechargées.



Vous définissez la vitesse de conduite du fauteuil en appuyant sur la tortue pour ralentir ou en appuyant sur le lièvre pour accélérer.





Lorsque le levier de commande est relâché, les roues arrière sont automatiquement freinées afin que le fauteuil reste en place.



Évitez de vous asseoir sur les 10 derniers centimètres du siège, car le fauteuil pourrait basculer vers l'avant.



Ne vous tenez pas sur les repose-pieds.

Art. numéro.	
	<p align="center">Siège de douche :</p> <p align="center">20180</p>
<p align="center">Charge max. 150 kg</p> <p>Attention! Poussez les clips vers le bas lors du réglage de la hauteur.</p> <p align="center">2 ans de garantie sur châssis. 6 mois sur batteries.</p> <p>Conditions de réclamation pour le cadre.</p> <p>La garantie s'applique à la production et aux pannes de matériaux. Elle ne peut être utilisée que si les produits ont été utilisés normalement. Veuillez noter que l'usure normale n'est pas couverte par la garantie.</p>	<p align="center">Nettoyage:</p> <p>Le produit peut être nettoyé régulièrement sans détergent et avec des solutions non abrasives. Lavez et séchez le produit après le nettoyage. Le produit peut être lavé à 85 ° C en 3 minutes.</p>



ZI du RECOU
 F 69520 GRIGNY
 Tel. : 04 72 24 08 99 Fax : 04 72 24 25 36
 E-Mail : cree@cree.fr
 www.cree.fr