

Lit douche

Manual - English

Manual - Svenska

Manual - Norsk

Manual - Dansk

Käyttöohje - Suomi

Gebrauchsanweisung - Deutsch

Handleiding - Nederlands

Manual - Français

Manual - Italiano

Manual - Español



Réf. 1221 1500 mm

Réf. 1310 1700 mm

Réf. 1223 1900 mm



Réf. 1305 1500 mm

Réf. 1301 1700 mm

Réf. 1304 1900 mm



Max: 150 kg/330 lbs

**EN Visual inspection**

Inspect the product regularly. Check to ensure that material is free from damage.

SE Visuell inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av produkten. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador.

NO Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Kontroller at materialet er helt og uten skader.

DK Visual inspektion

Foretag regelmæssige funktionskontroller af sengebordet. Kontroller, at materiale er helt og ikke udviser tegn på beskadigelse.

FI Silmämääräinen tarkastus

Tarkasta tuotteen toimivuus säännöllisesti. Tarkasta, ettei materiaalissa ole mitään vaurioita.

DE Sichtprüfung

Unterziehen Sie das Hilfsmittel regelmäßigen Funktionskontrollen. Vergewissern Sie sich, daß das Material unbeschädigt ist.

NL Visuele controle

Inspecteer het product regelmatig. Controleer op mogelijke beschadigingen van het materiaal.

FR Inspection visuelle

Effectuer des inspections régulières du fonctionnement du produit. Vérifier que le matériau est entièrement exempt de dommages.

IT Ispezione visiva

Testare il funzionamento del prodotto regolarmente. Verificare che il materiale non sia danneggiato.

ES Inspección visual

Realice periódicamente un control de funcionamiento del producto. Asegúrese de que el material no presente ningún tipo de desperfecto.

EN Before use

Ensure that the product is correctly mounted/installed.

SE Före användning

Kontrollera att produkten är rätt monterad/installerad.

NO Før bruk

Kontroller at produktet er korrekt installert.

DK Før brug

Kontroller, at produktet er korrekt installeret.

FI Ennen käyttöä

Tarkasta, että tuote on asennettu oikein.

DE Vor der Benutzung

Prüfen Sie das Produkt auf korrekte Montage.

NL Voor gebruik

Zorg ervoor dat het product juist is gemonteerd.

FR Avant l'utilisation

Vérifier que le produit est correctement installé.

IT Prima dell'uso

Verificare che il prodotto sia installato correttamente.

ES Antes de su uso

Compruebe que el producto esté correctamente instalado.

**EN Always read the manual**

Keep the manual where it is easily accessible for users of the product.

SE Läs alltid manualen

Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.

NO Les alltid manualen

Oppbevar manualen tilgjengelig for brukere av produktet.

DK Læs altid manualen

Opbevar manualen tilgængelig for brugere af produktet.

FI Lue aina käyttöohje

Säilytä käyttöohje tuotteen käyttäjien saatavilla.

DE Lesen Sie stets die gebrauchsanweisung

Verwahren Sie die Anleitung so, dass sie der Anwender des Produktes rasch zur Hand hat.

NL Lees altijd de handleiding

Bewaar de handleiding zo dat deze voor gebruikers van het product altijd beschikbaar is.

FR Toujours lire le manuel

Conserver le manuel pour qu'il soit accessible aux utilisateurs du produit.


IT Leggere sempre il manuale

Tenere il manuale delle istruzioni in un luogo facilmente accessibile agli operatori che utilizzano il prodotto.

ES Lea siempre el manual

Guarde el manual en un lugar accesible para el usuario del producto.

Using/Användning/Bruk/Brug/Käyttö/Anwendung/Gebruik/Utilisation/Utilizzo/Empleo

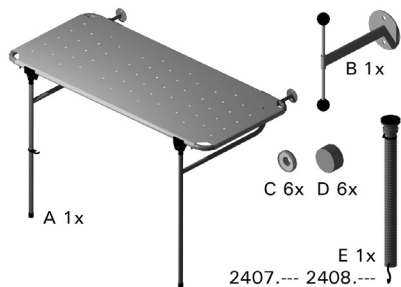

GB: Lock before use. Do not cut leg supports!

SE: Lås före användning. Kapa ej stödbenen!

NO: Leses før bruk. Kapp ikke støttebeina!

DK: Lås før brug. Skær ikke i benstøtterne!

FI: Lukitse ennen käyttöä. Jalkatukia ei saa lyhentää!







DE: Vor Benutzung schließen. Die Bodenstützen dürfen nicht selbstständig gekürzt werden!









NL: Vergrendelen voor gebruik. Steunpoten niet inkorten!

FR: Verrouiller avant usage. Ne jamais recouper les pieds de support!

IT: Fissare prima dell'uso. Non tagliare le gambe ribaltabili!

ES: Fijar antes de usar. No cortar las patas!

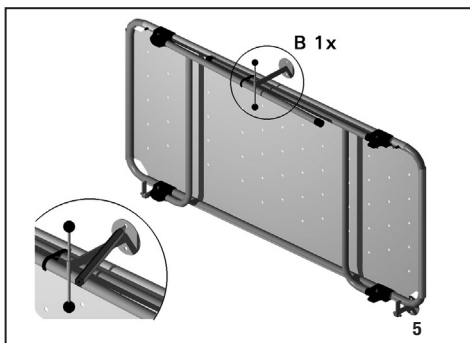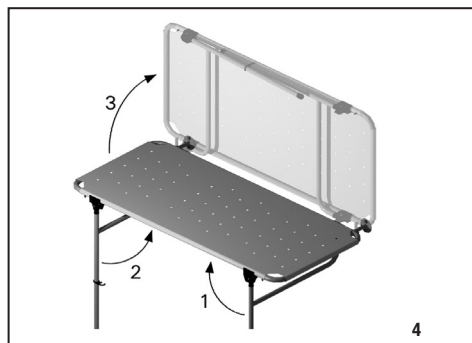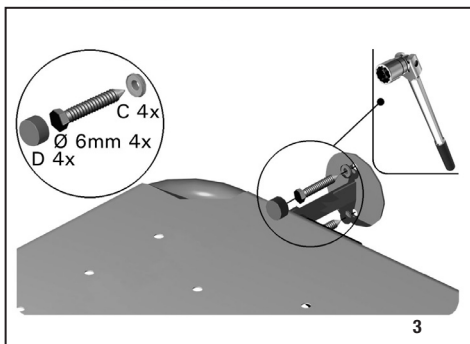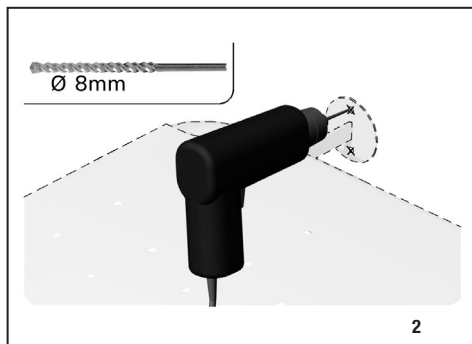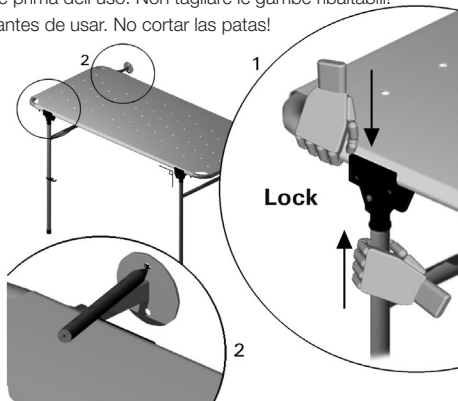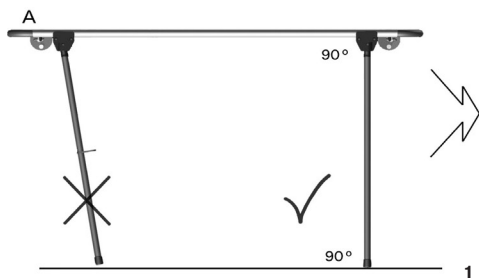

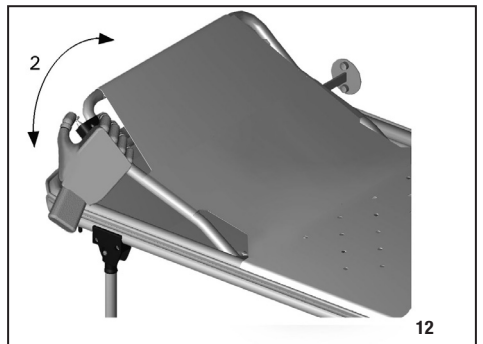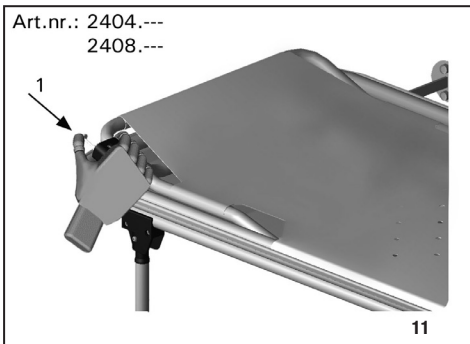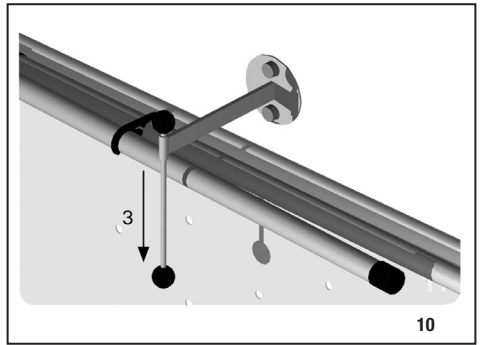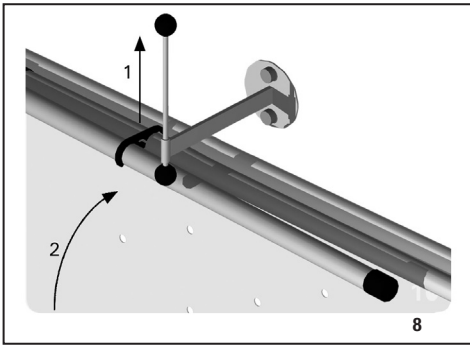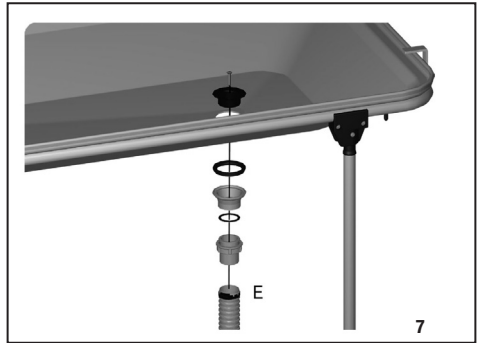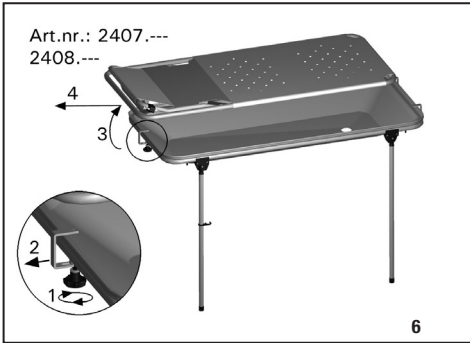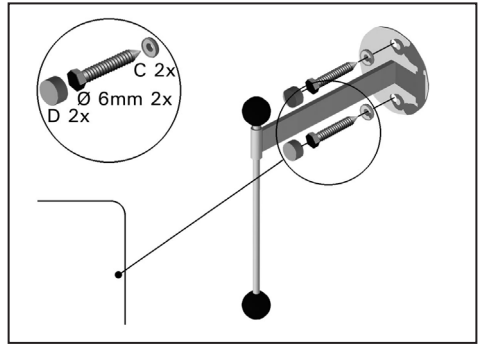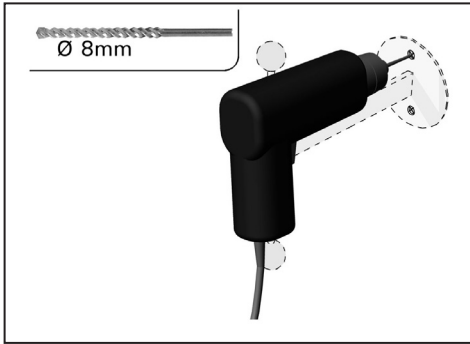

Maintenance/Rengöring/Vedlikeholdsråd/Vedligeholdelse/Hoito-ohje/Pflegeanleitung/ Onderhoud/Conseils d'entretien/Cura del prodotto/Cuidado del producto

EN Clean regularly with normal household detergent. Do not use aggressive cleaners. Handicare is not liable for damage caused by improper mounting/use.

SE För rengöring använd normalt och inte aggressivt rengöringsmedel. Handicare står ej ansvarig för skador som uppstår pga. felaktig montering/användning.

NO For rengjøring bruk nøytralt/normalt rengjøringsmiddel og ikke etsende midler. Handicare står ikke ansvarlig for skader som kan oppstå pga feilaktig motering/bruk.

DK Efter brug tjernes sæberester. Der må ikke anvendes hårde rengøringsmidler. Handicare er ikke ansvarlig for skader opstået pga. torkert montering/brug.

FI Puhdista säännöllisesti käyttäen kodin yleispuhdistusaineita. Älä käytä voimakkaita liuottimia. Handicare ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu virheellisestä asennuksesta tai käytöstä.

DE Beseitige nach Benutzung Seifenreste. Kein aggressives Reinigungsmittel verwenden. Handicare ist nicht haftbar für Schäden die durch unsachgemäße Befestigung/Benutzung oder falsches Befestigungsmaterial entstanden sind.

NL Verwijder na gebruik zeepresten. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Handicare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging/gebruik.

FR Laver régulièrement avec un détergent ménager. Ne pas utiliser de détergent agressif. Handicare n'est pas responsable des dommages causés par un montage/utilization incorrect.

IT Pulire periodicamente, utilizzando detersivi di uso corrente per la casa. Non usar prodotti abrasivi e corrosivo. Handicare non è responsabile per i danni causati dal montaggio/uso improprio.

ES Limpiar regularmente con cualquier detergente no corrosivo. No usar lejía ya que es muy corrosivo. Handicare no se hace responsable de cualquier deterioro causado por un montaje/uso incorrecto.

Accessories/Tillbehör/Tilbehør/Lisävarusteet/Zubehör/Accessoires/Accessori/Accesorios

Art. no:	Product name:	Description:
LI2807.0000-00	Wall mounting set	For wall mounting of all LinidoSolutions™ shower stretchers.
LI2860.0000-00	Insulation set M6 x 4	For electrical insulation and covering of fixing points, spare part for all shower stretchers.
LI2490.125-xx	Removable side fence	1250 x 170 mm, including plastic mounting clamps, for all LinidoSolutions™ shower stretchers.
LI2590.125x-xx	Hinged side fence	1250 x 235 mm, including plastic mounting clamps, for all LinidoSolutions™ shower stretchers.


Dimensions/Måttbeskrivning/Målbekrivelse/Mitat/Maßbeschreibung/Afmetingen/ Dimensioni/Dimensiones

Shower stretcher, flat

Art. no. LI2403.150x-xx -- LI2403.190x-xx

mm/inch

A	120/4,7
B	900/35,4
C	2xØ8,5/2xØ0,3
D	
E	1065/41,9
F	120/4,7
G	2xØ8,5/2xØ0,3
H	
I	685/26,9
J	180/7
K	2xØ8,5/2xØ0,3
L	670/26,3
M	80/3,1
N	755/29,7
O	785/30,9
P	52/2
Q	52/2

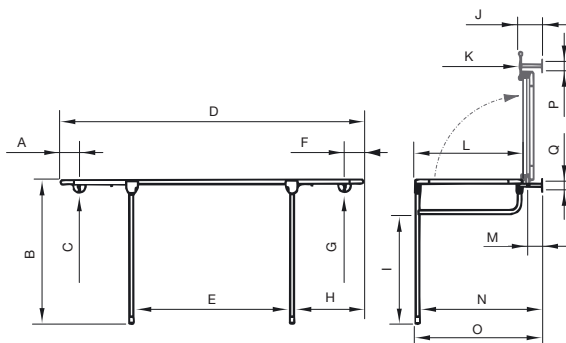


Art. No	D	H
LI2403.150	1490/58,6	185/7,2
LI2403.170	1690/66,5	285/11,2
LI2403.190	1890/74,4	385/15,1

Shower stretcher, adjustable backrest

Art. no. LI2404.150x-xx -- LI2404.190x-xx

mm/inch

A	900/35,4
B	
C	5-80°
D	2xØ8,5/2xØ0,3
E	
F	1065/41,9
G	120/4,7
H	2xØ8,5/2xØ0,3
I	
J	180/7
K	2xØ8,5/2xØ0,3
L	670/26,3
M	560/22
N	110/4,3
O	790/31,1
P	815/32
Q	52/2
R	52/2

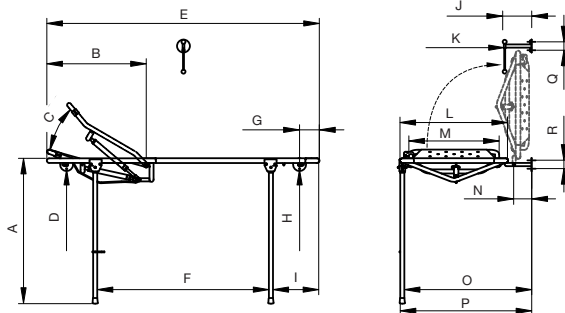


Art. No	B	E	I
LI2404.150	465/18,3	1490/58,6	185/7,2
LI2404.170	615/24,2	1690/66,5	285/11,2
LI2404.190	615/24,2	1890/74,4	385/15,1

Shower stretcher, flat, with water reciever and flexible drain hose Art. no. LI2407.150x-xx -- LI2407.190x-xx

mm/inch

A	
B	2xØ8,5/2xØ0,3
C	
D	1065/41,9
E	2xØ8,5/2xØ0,3
F	180/7
G	2xØ8,5/2xØ0,3
H	52/2
I	690/27,1
J	670/26,3
K	155/6,1
L	845/33,2
M	870/34,2
N	52/2

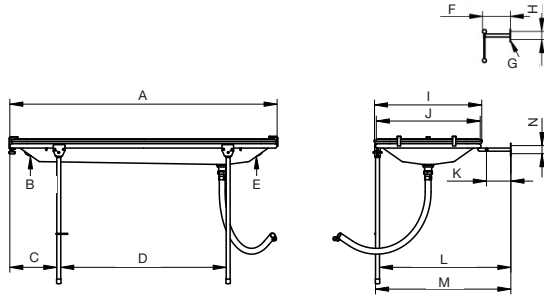


Art. Nr	A	C
LI2407.150	1520/59,8	200/7,8
LI2407.170	1720/67,7	300/11,8
LI2407.190	1920/75,5	400/15,7

Shower stretcher, adjustable backrest, with water reciever and flexible drain hose

Art. no. LI2408.150x-xx -- LI2408.190x-xx

mm/inch

A	
B	
C	5-80°
D	2xØ8,5/2xØ0,3
E	925/36,4
G	1065/41,9
H	2xØ8,5/2xØ0,3
I	180/7
J	2xØ8,5/2xØ0,3
K	52/2
L	690/27,1
M	560/22
N	155/6,1
O	845/33,2
P	870/34,2
Q	52/2

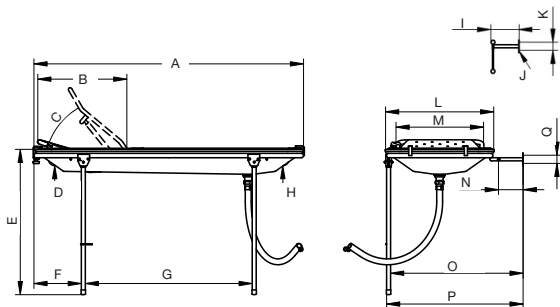

Art. Nr	A	B	F
LI2408.150	1520/59,8	465/18,3	200/7,8
LI2408.170	1720/67,7	615/24,2	300/11,8
LI2408.190	1920/75,5	615/24,2	400/15,7


Bathroom adaptations

LinidoSolutions

Technical drawings / Shower stretchers


All measurements are in mm. For complete article numbers, please consult the order information document which is available on our website.

Shower stretcher, flat | Art. no. LI2403.150x-xx -- LI2403.190x-xx

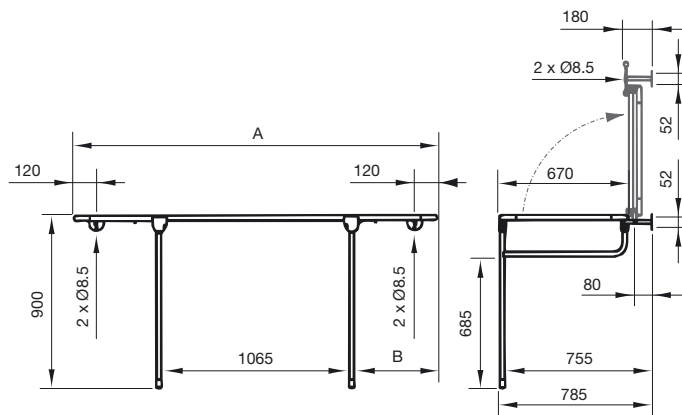

Art. Nr	A	B
LI2403.150	1490	185
LI2403.170	1690	285
LI2403.190	1890	385

Shower stretcher, adjustable backrest | Art. no. LI2404.150x-xx -- LI2404.190x-xx

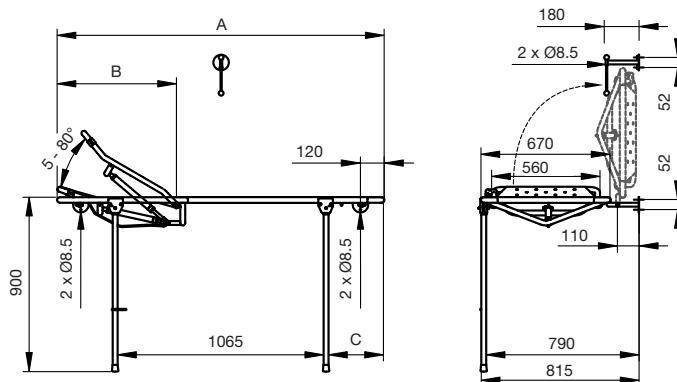

Art. Nr	A	B	C
LI2404.150	1490	465	185
LI2404.170	1690	615	285
LI2404.190	1890	615	385

Bathroom adaptations


LinidoSolutions

Technical drawings / Shower stretchers

All measurements are in mm. For complete article numbers, please consult the order information document which is available on our website.

Shower stretcher, flat, with water reciever and flexible drain hose


Art. no. LI2407.150x-xx --
LI2407.190x-xx

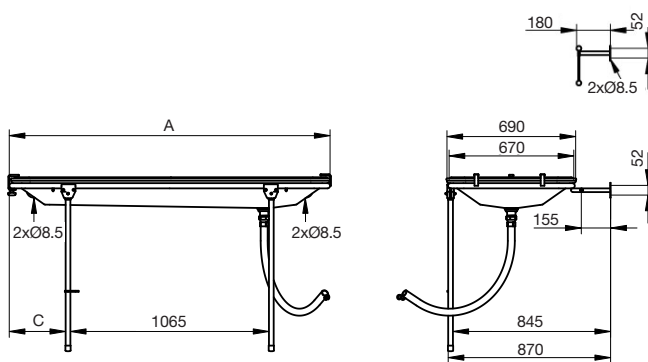

Art. Nr	A	B
LI2407.150	1520	200
LI2407.170	1720	300
LI2407.190	1920	400

Shower stretcher, adjustable backrest, with water reciever and flexible drain hose

Art. no. LI2408.150x-xx --
LI2408.190x-xx

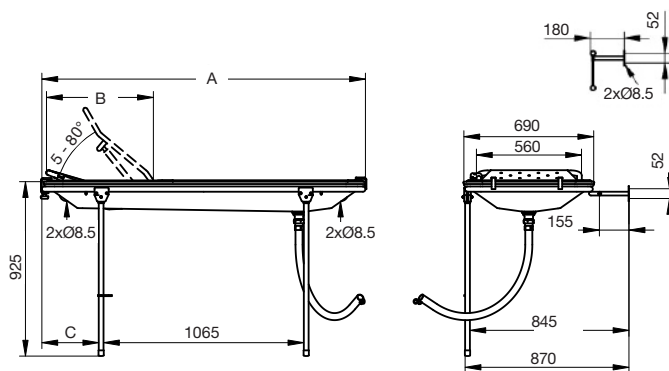

Art. Nr	A	B	C
LI2408.150	1520	465	200
LI2408.170	1720	615	300
LI2408.190	1920	615	400

Service d'assistance technique CREE :

0 899 493 251

**Service 0,60 €/min
+ prix appel**

