


**Guide de l'utilisateur pour la CHAISE DE DOUCHE/WC INOXLINE
INCL. A GAZ REF CREE 20119**








Lors du montage des roues, les pieds télescopiques sont placés dans les tuyaux et les clips sont montés à une hauteur appropriée et uniforme.

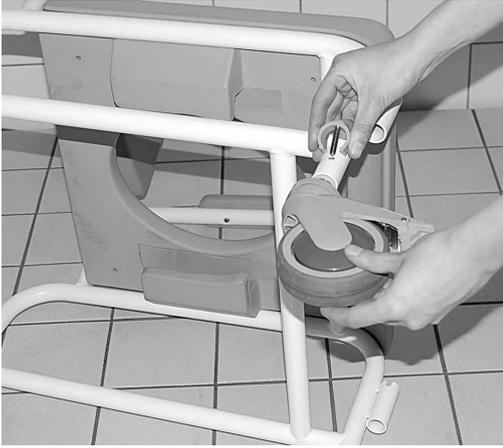


Lors du montage de l'accoudoir, le verrou à enclenchement est soulevé, puis l'accoudoir tiré vers le haut et poussé sur le côté.

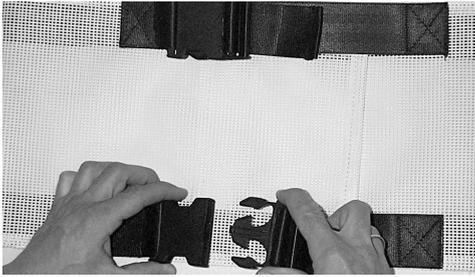

Ajustement en tension du dossier (voir photos).
Important! Lavage de la toile à 80 degrés maximum

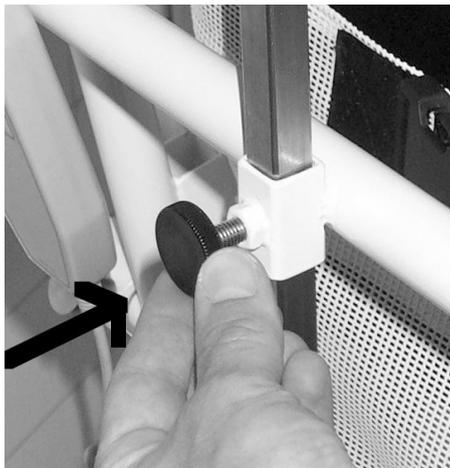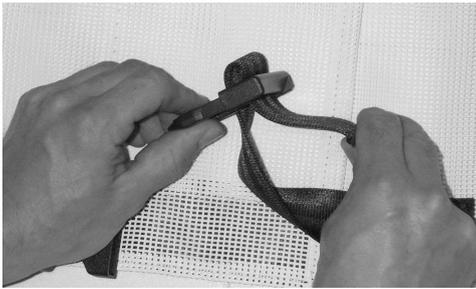

L'appui-tête est réglable en hauteur en desserrant et en serrant la vis à la bonne position.

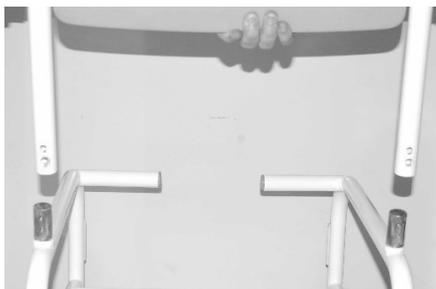


Les vis sont serrées à l'aide de la clé Allen lors du montage à l'arrière.
Assurez-vous que les vis soient bien serrées pour assurer la stabilité.




La hauteur du repose-pied est réglée au moyen de clips. Pour plus d'espace, les repose-pieds peuvent être écartés en les soulevant et en les tournant, tandis que les repose-pieds peuvent être inclinés




Verrouillez les quatre roues lorsque vous vous baignez / prenez une douche. La roue avant droite (gris foncé) peut être verrouillée pour faciliter la conduite jusqu'à chaise.

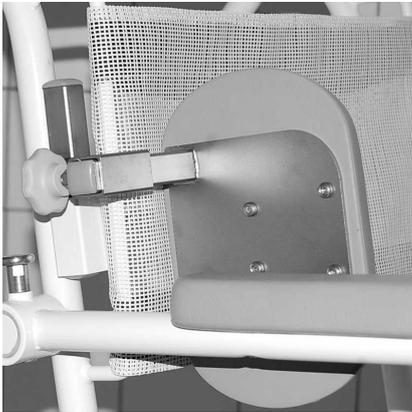


Les supports latéraux sont cliqués dans les tuyaux carrés du cadre. En ajustant la profondeur, desserrer la vis à serrage manuel et resserrer à la bonne position.

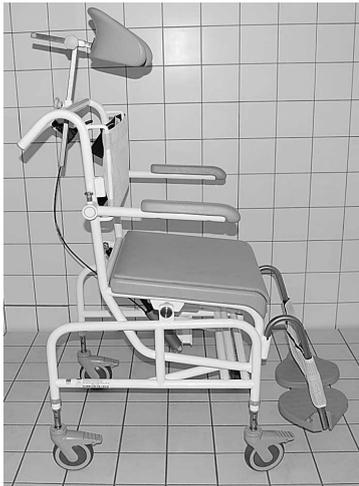


Sachez que l'utilisateur peut tomber en avant ! En utilisant le support contre la chute, ce risque est éliminé. Ce support ne peut être utilisé que sur le fauteuil de douche/toilette Inoxline

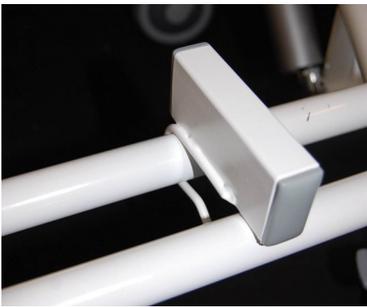

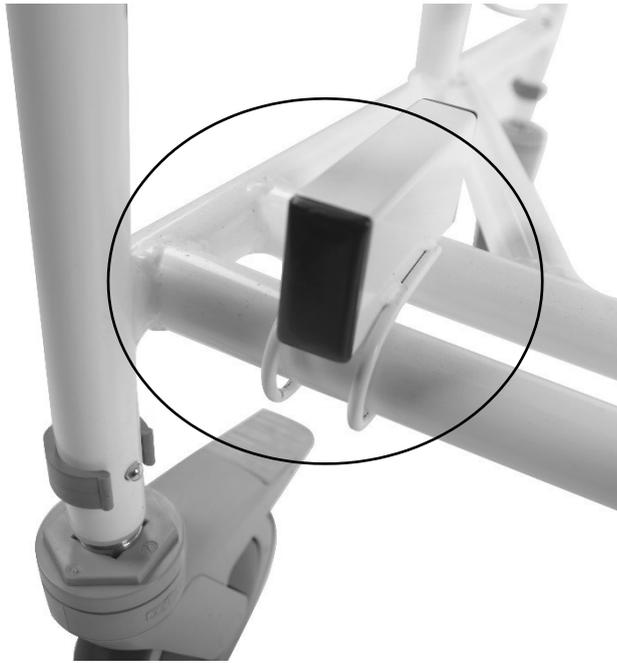

Support pour éviter la pointe négative

Supports de montage

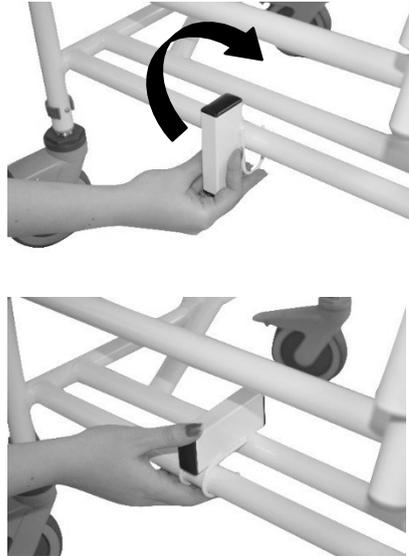

Mettre au devant de la chaise

Seulement pour la chaise Inoxline.



Numéro de l'article	
<p style="text-align: center;">Max. Charge 150 kg</p> <p>Attention! Poussez les clips vers le bas lors de l'ajustement des hauteurs. 2 ans de droits de plainte contre erreurs de fabrication.</p> <p>Conditions de réclamation pour le cadre.</p> <p>HMN accorde 5 ans de droits de réclamation contre la rupture de cadre pour toutes les chaises de douche / de toilettes M2 et les tabourets de douche en acier inoxydable. La garantie s'applique aux panes de production et de matériel et ne peut être utilisée que si les produits ont été utilisés normalement. Veuillez noter que l'usure normale n'est pas couverte par la garantie.</p>	<p style="text-align: center;">Nettoyage:</p> <p>Le produit peut être nettoyé avec un nettoyage régulier sans détergent non abrasif. Laver et sécher le produit après le nettoyage. Le produit peut être lavé à 85 degrés en 3 minutes.</p> <div style="text-align: center; font-size: 48px; font-weight: bold; margin-top: 20px;">CE</div>

Ne vous tenez pas sur les repose-pieds.



Évitez de vous asseoir sur les 10 derniers centimètres du siège car le fauteuil pourrait basculer vers l'avant.



DISTRIBUTEUR
ZI du RECOU
F 69520 GRIGNY
Tel. : 04 72 24 08 99 Fax : 04 72 24 25 36
E-Mail : cree@cree.fr
www.cree.fr